



# RELENZA™

## 瑞樂沙旋達碟 本藥限由醫師處方使用

### ZANAMIVIR FOR INHALATION

此份資料將教導病患您如何使用瑞樂沙旋達碟，請仔細閱讀以下資料，如果對於瑞樂沙旋達碟有任何的問題，請向您的醫生或藥師諮詢。

## 碟式吸入器 內部零件圖



### 瑞樂沙旋達碟 Relenza Rotadisk™ 重要使用安全資訊：

1. 使用本藥後，若症狀未改善或出現其他不舒服的症狀時，請告知您的醫生或藥師。
2. 使用本藥後，若發生嚴重的呼吸道症狀(如：胸悶、呼吸急促、呼吸困難)，請立即停用本藥，並聯絡醫生或前往鄰近的醫院請求協助。
3. 在使用瑞樂沙旋達碟時，若同時有使用其他治療氣喘或慢性肺病的藥物，請繼續使用該藥物。
4. 若有使用其他吸入型藥物，請先吸入該藥物後，再使用瑞樂沙旋達碟。
5. 若您有氣喘或其他慢性肺病，請在使用瑞樂沙旋達碟前，確認您有足夠的“急救緩解藥物吸入劑”吸入藥。



# RELENZA™

## ZANAMIVIR FOR INHALATION

# 瑞樂沙旋達碟 使用流程

### 一、裝置旋達碟

1. 脫開藍色外殼



4. 裝入一片新的旋達碟於轉輪上，印刷面朝上



2. 拉開白色托盤



5. 將裝有旋達碟的白色托盤推回原位



3. 壓住兩側的凸起條紋來將白色托盤脫離主體



四顆藥囊用畢，重複步驟一

### 四、結束用藥

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔



2. 蓋回藍色外殼



### 二、吸入前準備

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔



2. 將折蓋拉起至垂直後推回，如此可刺破一個藥囊。確保旋達碟維持水平直到吸藥完成



### 三、連續吸入兩劑量

1. 於舒適狀態下盡量呼氣，此時將吸入器遠離嘴巴



3. 拉出白色托盤後並推回白色托盤，此動作會將下一個藥囊推向刺針下方



2. 將吸口置於上下牙齒間，並維持吸入器的水平。緊閉雙唇包住吸口，但不要咬或將吸口兩側的氣孔堵住。

透過吸口做一個快且深的吸氣來吸入藥劑。摒住呼吸2秒並將吸入器移開嘴巴




4. 折蓋拉起至垂直並推回，刺破第二個藥囊，準備吸藥



5. 吸入第二劑

重複步驟三裡的1,2,3

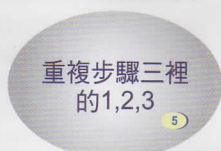

建議劑量  
**早晚一次  
每次兩劑**



荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

台北市忠孝西路一段66號24樓 電話: 02-2381-8866 傳真: 02-23120812 網址: www.gsk.tw

使用前詳閱說明書警語及注意事項 TW/NA/0002/14-FEB-2014



請連結至www.gsk.tw網址觀看瑞樂沙旋達碟使用方式教學影片